



기타 재료

소모품

제품 이미지	품명	품번	규격
	석고 취형 연필		독일제 6자루 단위 판매
	이지 커터	4040-SM	소형
		4040-ST	표준형
	PVA 백	T090040000	4 X 2 X 40인치, 20개 단위 포장
		T090060000	6 X 2 X 40인치, 20개 단위 포장
		T090080000	8 X 2 X 40인치, 20개 단위 포장
		T090100000	10 X 2 X 40인치, 20개 단위 포장
		T090120000	12 X 2 X 40인치, 20개 단위 포장
	C-폼 캐스팅 테이프	4013-2	2인치 X 4야드, 10롤 단위 포장
		4013-3	3인치 X 4야드, 10롤 단위 포장
		4013-4	4인치 X 4야드, 10롤 단위 포장
		4013-5	5인치 X 4야드, 10롤 단위 포장
	카본 브레이드	4016-3	3인치 X 3M
		4016-3-15	3인치 X 15M
		4016-4	4인치 X 3M
		4016-4-15	4인치 X 15M
		4016-5	5인치 X 3M
		4016-5-15	5인치 X 15M
		4016-6	6인치 X 3M
		4016-6-15	6인치 X 15M
		4016-8	8인치 X 3M
	유니그립	4030-1	8줄/시트
		4030-2	4줄/시트



ST&G 사이트 접속



- 1 유니그립은 한 방향의 극세사선으로 이루어져 있습니다
- 2 누워있는 방향으로의 저항이 없이 미끄러지며
- 3 반대방향으로는 압력에 따라 저항을 발생시켜 미끄러짐이 사라집니다.



하퇴소켓의 서스펜션 기능



대퇴소켓의 서스펜션 기능 & 회전방지 기능

기타 재료

전사지

제품 이미지

품 명

품 번

규 격


사인 전사지

0106950XX


사이즈 : 1.5 X 1M
장당 판매
종류 : 13종




010695-003

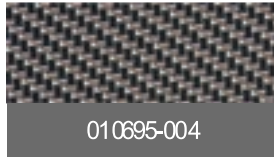

010695-004

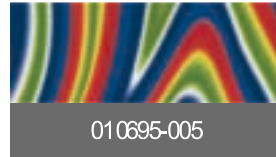

010695-005

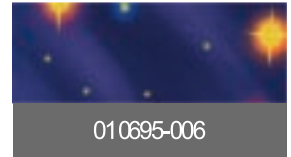


010695-006




010695-012



010695-013

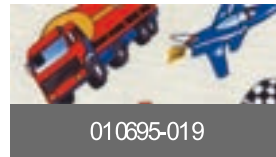


010695-019

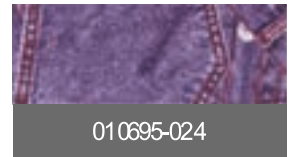


010695-024




010695-028

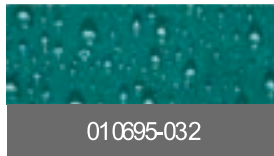


010695-032

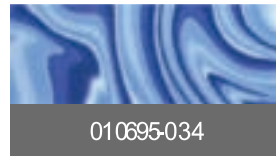

010695-034

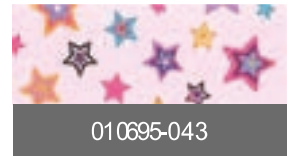

010695-043

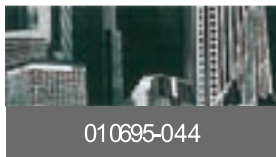

010695-044

노스씨 전사지

NSXX


사이즈 : 0.8 X 1M
10M단위 판매
종류 : 9종



U.K-3



U.K-4

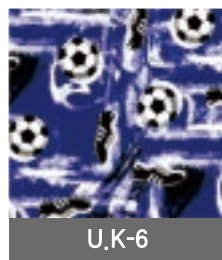

U.K-6



U.K-7



U.K-8



U.K-9



U.K-15



U.K-16



U.K-18



실리콘 이형제

전사지용
내용량 : 420ml

실리콘

제품 이미지	품명	품번	규격																														
 	맞춤형 라이너용 실리콘	Dragon Skin	커스텀 라이너 제작용 내용량 : 400ml																														
Silicone 적용 안내 ▶ 의수족용 라이너 (10 and 20) ▶ 말단부 패드 (00 and 5) ▶ 족지 (20) <table> <tr> <th>강도순위</th><th>색상</th><th>작업시간</th><th>경화시간</th><th>비율</th></tr> <tr> <td>Dragon Skin 20</td><td>투명</td><td>45분</td><td>4시간</td><td>1:1</td></tr> <tr> <td>Dragon Skin 10</td><td>투명</td><td>8분</td><td>75분</td><td>1:1</td></tr> <tr> <td>Ecoflex 5</td><td>투명</td><td>1분</td><td>5분</td><td>1:1</td></tr> <tr> <td>Ecoflex 0050</td><td>투명</td><td>18분</td><td>3시간</td><td>1:1</td></tr> <tr> <td>Ecoflex 0030</td><td>투명</td><td>45분</td><td>4시간</td><td>1:1</td></tr> </table>				강도순위	색상	작업시간	경화시간	비율	Dragon Skin 20	투명	45분	4시간	1:1	Dragon Skin 10	투명	8분	75분	1:1	Ecoflex 5	투명	1분	5분	1:1	Ecoflex 0050	투명	18분	3시간	1:1	Ecoflex 0030	투명	45분	4시간	1:1
강도순위	색상	작업시간	경화시간	비율																													
Dragon Skin 20	투명	45분	4시간	1:1																													
Dragon Skin 10	투명	8분	75분	1:1																													
Ecoflex 5	투명	1분	5분	1:1																													
Ecoflex 0050	투명	18분	3시간	1:1																													
Ecoflex 0030	투명	45분	4시간	1:1																													
	커스텀 라이너용 수지(VIVAK)		600 X 1200 X 3mm 600 X 1200 X 4.7mm 600 X 1200 X 6mm																														
	실리콘 건(수동)		실리콘 건 커스텀 라이너 제작																														
	체크소켓용 수지(링 마스터) RM13-CRY		13 X 41mmØ																														

링 마스터 사용방법

- 오븐을 185도로 예열하세요.
- 음성 석고모델을 준비하세요. (락더미, 밸브 더미 등 부착)
- 알루미늄 지지대를 오븐에 넣습니다.
- 링 마스터 수지를 알루미늄링 사이에 넣어 고정합니다. 결합된 링을 링 마스터 수지의 중심점이 아래로 향하게 하여 지지대 위에 올려두고 약 15분간 가열하세요.
- 플라스틱이 모형의 1/2~2/3 정도 차지하면 오븐을 열고 랙을 당겨 빼냅니다. 링 마스터 수지와 프레임을 잡고 석고모델에 뒤집어서 일반적인 드로잉 작업처럼 약간 비틀면서 아래로 당기고 진공을 적용합니다.
- 냉각되면 일자 알루미늄 지지 링과 플라스틱 사이에 드라이버를 넣고 비틀어 줍니다. 이렇게 하면 플라스틱과 지지대가 분리되고 링을 제거할 수 있습니다. 이제 트림라인을 만들고 소켓을 자릅니다.